

## ЗАМЕНА ФИЛЬТРА С ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕШКОМ

**ЭТА ОПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ С ВЫКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМОЙ.**

**БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПОВРЕДИТЕ УПЛОТНЕНИЕ И НЕ ПОРВИТЕ МЕШОК.**

ВЫПОЛНЯЙТЕ СОГЛАСНО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

- 1) Используя выступы, откройте дверцу доступа к фильтру.
- 2) Разверните усиленный пластиковый мешок (Рис. 1).

*1° CANISTER OPENING*

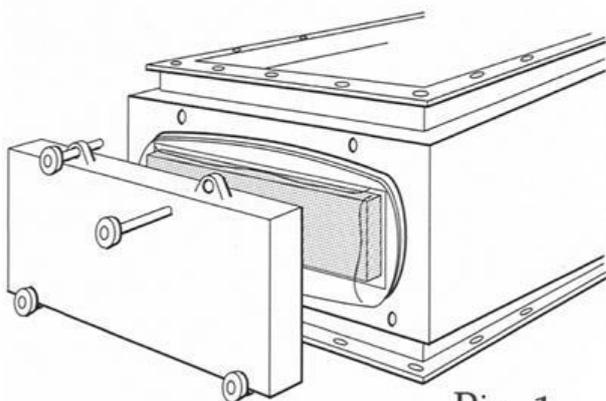


Рис. 1

Рис. 1

- 3) Освободите рычаги крепления фильтра.
- 4) Вытяните фильтр, продвигая его внутри мешка и укладывая на полу или плоской поверхности (Рис. 2).

*2° FILTER EXTRACTION*

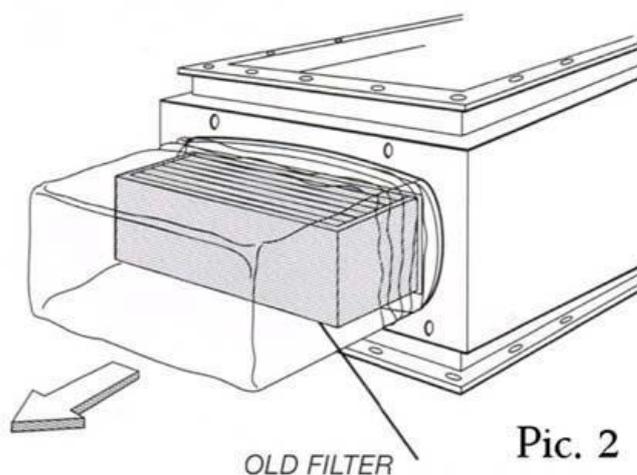


Рис. 2

Рис. 2

- 5) С помощью устройства термогерметизации сделайте два поперечных герметичных уплотнения поперек мешка, ближе к задней кромке фильтра (Рис.

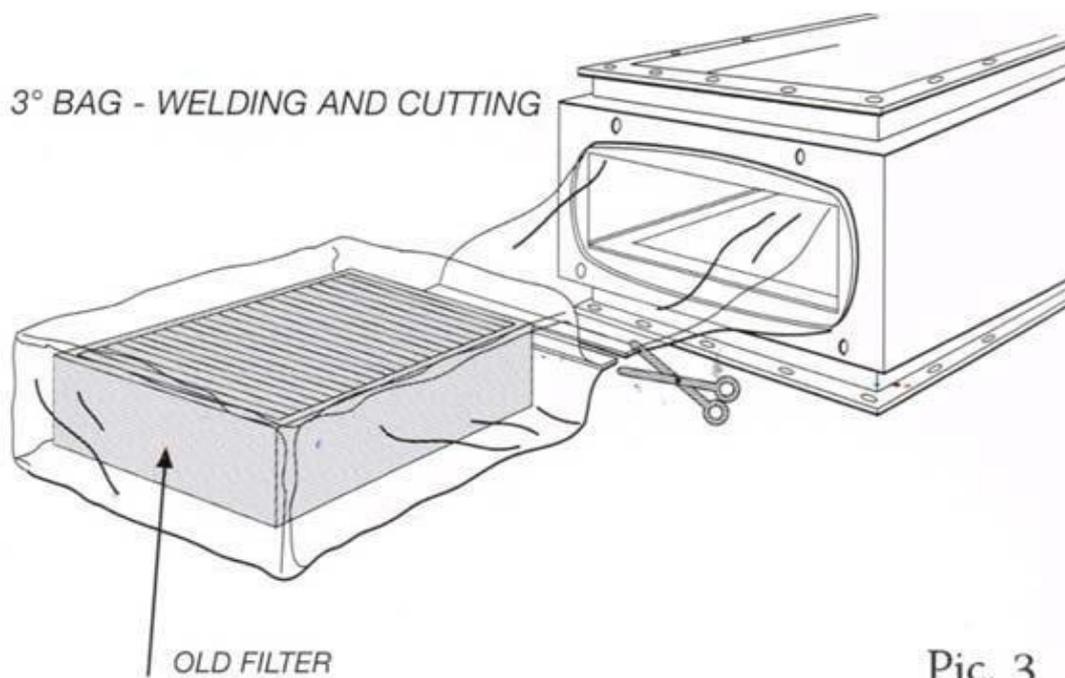


Рис. 3

6) Вставьте новый фильтр в новый пластиковый мешок и разместите его ближе к его защитному корпусу.

7) Установите новый мешок в направляющий канал в задней части зоны обслуживания, закрепляя его на месте с помощью нового эластичного уплотнительного кольца (Рис. 4).

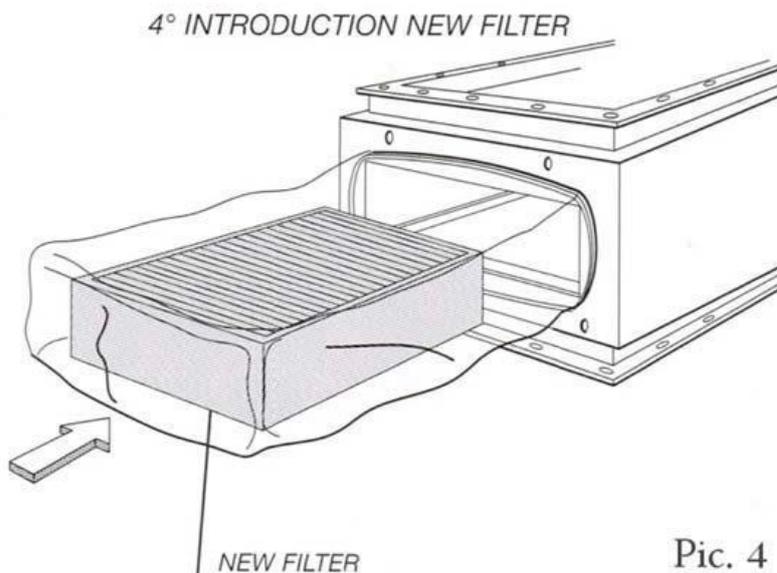


Рис. 4

8) Отрежьте край теплоизолированного мешка, размещая его внутри нового мешка.

9) Вставьте новый фильтр, придерживая сторону с уплотнением кверху, так, чтобы он задвинулся вовнутрь паза с помощью рычагов (Рис. 5).

*5° EXTRACTION OF THE BAG END*

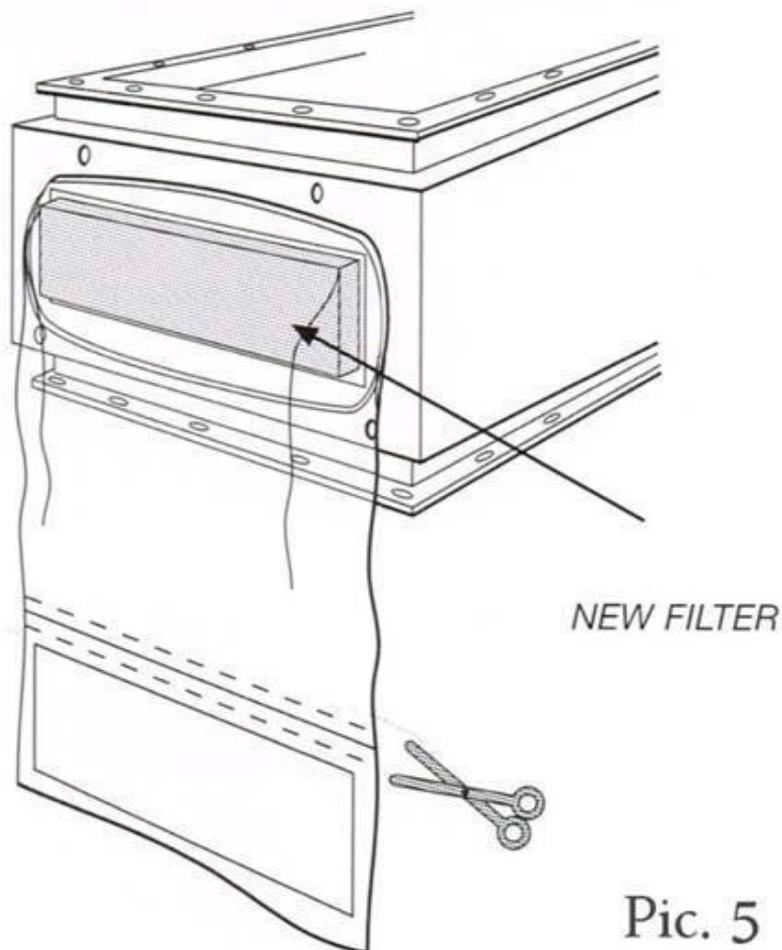


Рис. 5

10) Заверните мешок вовнутрь проема и установите на место дверцу корпуса. Проверьте состояние уплотнителя и затяните крепление двери.